



OCEAN

MB/PC280
LIBRETTO DI ISTRUZIONI

(For the English version, please check the digital version on our website.)

AVVERTENZE

Sicurezza durante l'installazione

- Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo della poltrona, leggere attentamente il manuale d'istruzioni avendo cura di seguire tutte le indicazioni e le avvertenze ivi contenute. Sono riportate importanti informazioni di sicurezza in fase di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto!
- Dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità e la completezza del contenuto. In caso di dubbi, non utilizzare il prodotto e contattare il nostro customer service.
- La poltrona Ocean va posizionata su di una superficie piana, livellata e in grado di sopportare il peso della poltrona quando l'apparecchiatura è caricata, facendo riferimento al carico massimo ammissibile.
- **Attenzione! Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di spostare la poltrona Ocean come illustrato in fig. 2.**

Sicurezza durante l'utilizzo

- L'apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il qual è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erranei ed irragionevoli, i quali comportano la perdita di ogni diritto di garanzia.
- L'utilizzo è consentito al solo personale che esegue il trattamento (podologo, estetista).
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi in vicinanza dell'apparecchio.

Sicurezza durante la manutenzione

- Pulizia e manutenzione devono essere effettuate soltanto da persone qualificate per tale attività e non devono essere effettuate da parte di persone che non ne conoscano il funzionamento.

Trasporto / Stoccaggio / Requisiti di utilizzo

Il trasporto deve avvenire esclusivamente all'interno dell'imballaggio originale.

Trasporto e conservazione a temperatura: da -20° C a +50° C

Temperatura di utilizzo: da +10° C a +40° C

Umidità relativa dell'aria: max. 90%, senza condensa

Evitare brusche variazioni di temperatura, per evitare la formazione di condensa.

USO PREVISTO

La poltrona Ocean è stata progettata per offrire il massimo del comfort durante trattamenti podologici e pedicure. Ruotando di 90° assicura la facilità d'uso tanto da parte del cliente quanto da parte dell'operatore. La poltrona poggia su di una struttura rettangolare in acciaio inox sulla quale è collocata una vasca per pedicure in ceramica bianca, completa di mixer e sistema di scarico a pavimento. Ocean è dotata anche di un poggiatesta imbottito regolabile in altezza e avanti/indietro.

COMPONENTI

La fig.1 riporta i principali componenti della poltrona per trattamenti podologici Ocean.


Legenda:

1. Base in acciaio inox
2. Vasca per pedicure in ceramica
3. Rubinetteria: miscelatore con erogatore orientabile
4. Poggiatesta regolabile
5. Poltrona girevole (90°)

Fig. 1



Fig. 2

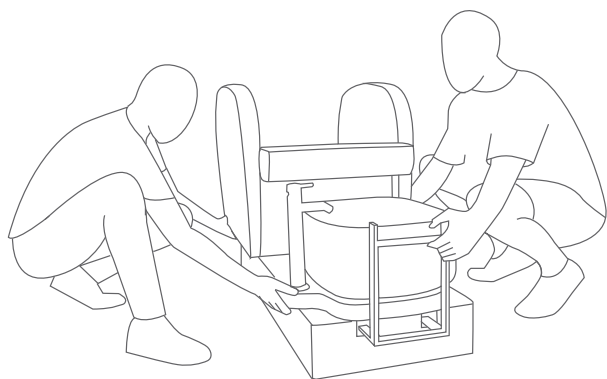


Per procedere all'installazione:

1. Rimuovere il pannello posteriore della poltrona
2. Rimuovere i pannelli in acciaio posteriore e anteriore della base
3. Posizionare il fermo di semi-rotazione dal lato desiderato
4. Regolare i piedini registrabili, se necessario
5. Tracciare a suolo, forare e tassellare la struttura tramite i quattro angolari registrabili
6. Collegare lo scarico e alimentazione idrica, vedi fig. 4
7. Verificare la tenuta dell'allacciamento idrico e dell'evacuazione
8. Ripristinare le pannellature

Fig. 4

A= CARICO ACQUA FREDDA 3/8"
B= SCARICO 0/40
C= CARICO ACQUA CALDA 3/8"

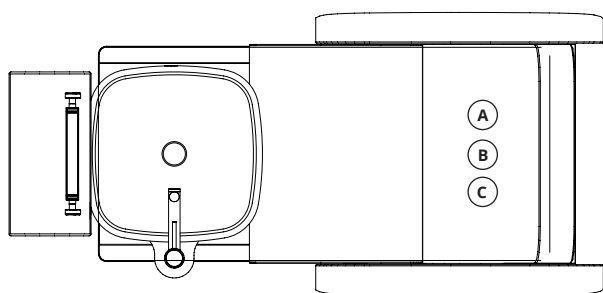

UTILIZZO

Per procedere all'utilizzo:

1. Ruotare la poltrona per fare accomodare il cliente
2. Regolare il cuscinetto poggipiedi in altezza e in profondità tramite gli appositi volantini
3. Procedere al trattamento
4. Il tappo della piletta di scarico è dotata di sistema clic-clac
5. Igienizzare la vasca dopo ogni utilizzo

MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Pulire la tappezzeria della poltrona solo con acqua tiepida, sapone neutro e un panno morbido.

Le macchie devono essere rimosse immediatamente per evitare che penetrino nel tessuto.

Pulire il telaio della poltrona con un panno leggermente inumidito.

Non strofinare disinfettanti sulla tappezzeria.

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi che potrebbero causare danni alla tappezzeria.

Non utilizzare sostanze che contengono olio o grasso per pulire la tappezzeria.

Il rivestimento non è resistente ai prodotti chimici e di lavaggio a secco.

Riparazione e manutenzione

Periodicamente verificare il buon funzionamento dei raccordi idrici.

La poltrona non richiede alcuna manutenzione speciale, se usata correttamente e in conformità con le indicazioni e le istruzioni del produttore.

Tuttavia, in caso di qualsiasi eventuale problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Tutti gli interventi tecnici devono essere effettuati da professionisti competenti.

Smaltimento

Le diverse parti dell'imballaggio, la poltrona, la tappezzeria ed i relativi accessori devono essere smaltiti in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA



Costruttore	Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Enzo Lazzaretti 12 42122 Reggio Emilia www.medicalandbeauty.com info@medicalandbeauty.com
Modello	Ocean MB/PC280
Funzione	Apparecchiatura di supporto agli operatori nei trattamenti estetici e podologici
Anno di costruzione	2026
Massimo carico ammesso alla poltrona	130 Kg



Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Lazzaretti 12 42122 Reggio Emilia
Sales Italia 0522 276740 International Sales 0522 276755 Fax 0522 276767
info@medicalandbeauty.com • www.medicalandbeauty.com